

Eine zahnmedizinische Empfehlung für
gesündere Zähne, gesünderes Zahnfleisch



XiroDesept®

Alkoholfrei

Antibakterielle Fertiglösung 0,06% CHX
für Waterpik® Mundduschen

NEU



Fördert die Wundheilung, schützt gezielt
vor Zahnfleischentzündungen und Parodontitis,
sorgt für optimale Implantat-Pflege

Hier werden Sie gut beraten:

Waterpik® Mundduschen

Dass der Gebrauch einer Munddusche von **Waterpik®** in Ergänzung zum täglichen Zähneputzen nützlich und sinnvoll ist, ist wissenschaftlich gesichert und zahnmedizinisch anerkannt. **Waterpik®** als Erfinder und weltgrößter Hersteller von Mundduschen mit einer jahrzehntelangen Erfahrung ist unübertroffen die Nr. 1 unter den Mundduschen und auch die einzige Mundduschenmarke der Welt, welche mit über 50 (!) wissenschaftlichen, evidenzbasierten Forschungsarbeiten die positive Auswirkung ihrer Mundduschen für gesündere Zähne und gesünderes Zahnfleisch signifikant belegen kann. Mit Hilfe ihres pulsierenden, nach Druckstärken einstellbaren Wasserstrahls entfernen **Waterpik®** Mundduschen nachweislich 99,9% des gefährlichen Plaque-Biofilms – Ursache der meisten Zahn- und Zahnfleischprobleme – sind doppelt so wirksam wie Zahnseide und viel einfacher in der Anwendung.

Je nach Bedarf gibt es verschiedene Düsen-Aufsätze wie z.B. die druckminimierte Spezial-Düse **Pik Pocket® PP-100** zur punktgenauen Soft-Applikation, die **Orthodontic-Düse OD-100** zur gezielten Reinigung von Zahnspangen und Bändern oder den **Zungenreiniger TC-100** gegen Mundgeruch.


XiroDesept®

Im normalen Gebrauch resultiert die Leistung einer **Waterpik®** Munddusche aus einem Wasserstrahl mit etwa 20 Pulsationen/Minute. Zur Intensivprophylaxe, zur Reduktion vor paropathogenen Bakterien sowie zur gezielten Nachsorge von zahnärztlich eingeleiteten therapeutischen Maßnahmen wird jedoch bei der häuslichen Mundhygiene eine 0,06%ige CHX-Fertiglösung wie **XiroDesept®** einfach statt Wasser angewendet.

XiroDesept® ist die eigens für **Waterpik®** Mundduschen entwickelte antibakterielle 0,06%ige CHX-Fertiglösung, erhältlich im Set mit 12 Portionsfläschchen à 50 ml. **XiroDesept®** kann der Patient zu Hause nach Anweisung seiner Zahnarztpraxis problemlos und dosiergenau mit der **Waterpik®** Munddusche und der dazugehörigen Spezial-Düse **Pik Pocket® PP-100** gezielt und behutsam am Zahnfleischsaum entlang und auf die entzündungsgefährdeten Problemzonen applizieren (s. Rückseite).



Waterpik®
Munddusche
Ultra Professional WP-100E4

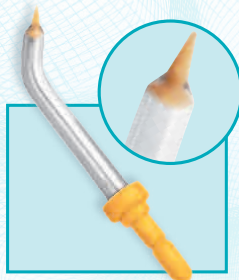


Waterpik®
Spezial-Aufsteckdüse
Pik Pocket PP-100



XiroDesept® XD-12
Antibakterielle
Einmal-Fertiglösung
0,06% CHX

Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass diese System-Anwendung um das Dreifache wirksamer ist, als das konventionelle Ausspülen des Mundes mit einer doppelt so hoch konzentrierten 0,12%igen CHX-Lösung. Ein weiterer positiver Effekt: das Risiko von Zahnverfärbungen und Geschmacksbeeinträchtigungen wird minimiert.

Weitere Informationen auch unter www.gingiva-schutzsystem.com

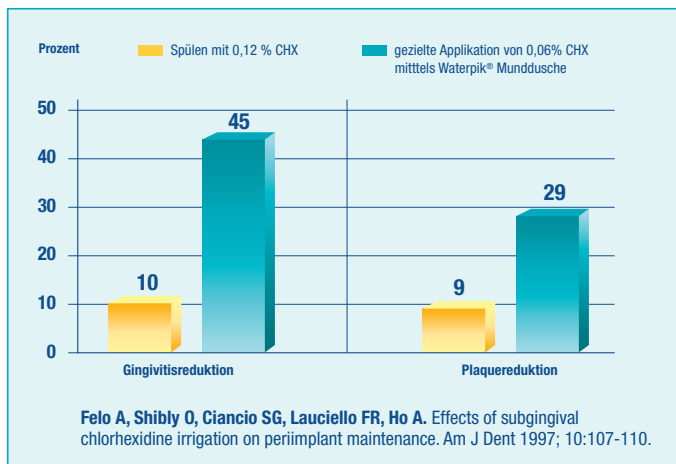

Signifikante Reduktion von Gingivitis (Zahnfleischentzündungen) und Plaque durch das medizinische Schutzsystem

Waterpik® Munddusche
+ Waterpik® Spezial-Düse **Pik Pocket**
+ antibakterielle 0,06% CHX Fertiglösung

Waterpik® Mundduschen und **XiroDesept®** 0,06% CHX Fertiglösung erhalten Sie in Ihrer Zahnarztpraxis, in Ihrer Apotheke oder direkt von **interessanté GmbH**.



Waterpik®
Munddusche
de Luxe **WP-660E**

€ 165,00*
PZN 10993924



Waterpik®
Munddusche
Ultra Professional **WP-100E4**

€ 119,95*
PZN 06414599



Waterpik®
Dental-Center
Complete Care **WP-900E**

€ 199,00*
PZN 09778646



XiroDesept® XD-12
Antibakterielle
Einmal-Fertiglösung
0,06% CHX im Set mit 12
Portionsflaschen à 50 ml

€ 23,45*
PZN 11018606

Antibakterielle Fertiglösung 0.06% CHX schützt gezielt vor Zahnfleischentzündungen, Parodontitis und Periimplantitis




XiroDesept®

Gebrauchsanweisung

1. Als erstes wechseln Sie die Standard –Düse Ihrer **Waterpik®** Munddusche gegen die Spezial-Aufsteckdüse **Pik Pocket®** aus. Achten Sie darauf, dass der Tank der Munddusche leer ist.
2. Stellen Sie den Druckstärkeregler Ihrer **Waterpik®** Munddusche auf die Position 0 (Null).
3. Gießen Sie den Inhalt einer Portionsflasche **XiroDesept®** (50ml) vollständig in den Wassertank. Dann die Spezial-Aufsteckdüse **Pik Pocket®** in den Mund nehmen und das Gerät einschalten.
4. **XiroDesept®** Fertiglösung langsam entlang des Zahnfleischsaums an Unter- und Oberkiefer (innen und außen) applizieren, auf Problemzonen (entzündetes Gewebe, Zahnfleischtaschen) etwas verweilen; um Zahnimplantate und Miniimplantate (bei herausgenommener Prothetik) kreisen, bis die ganze Flüssigkeit aufgebraucht ist. Den Mund nicht nachspülen! Anschließend die **Waterpik®** Munddusche und Spezial-Aufsteckdüse **Pik Pocket®** mit klarem Wasser durchspülen.




1 Pik Pocket® Düse aufsetzen

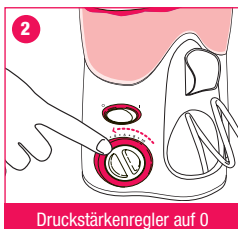

2 Druckstärkeregler auf 0




3 XiroDesept® einfüllen

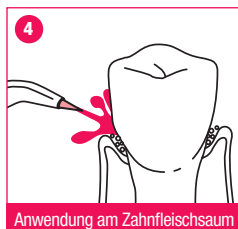


4 Anwendung am Zahnfleischsaum




5 Anwendung am Oberkiefer

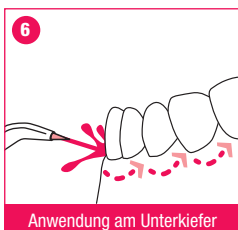

6 Anwendung am Unterkiefer

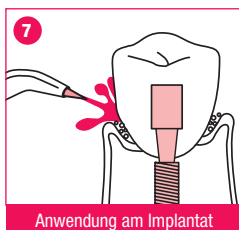

7 Anwendung am Implantat

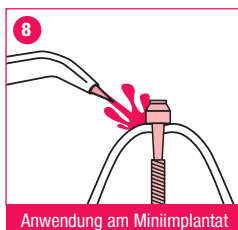

8 Anwendung am Miniimplantat

■ Hinweis:

Bei chlorhexidinhaltigen Produkten können sehr selten allergische Reaktionen auftreten. Bei ersten Anzeichen wie Hautveränderungen /-ausschlag, Atemnot, Schwellungen von Mund und Gesicht die Anwendung sofort abbrechen und Arzt aufsuchen. In seltenen Fällen kann es zu leichten oberflächlichen Zahn- und Zungenverfärbungen kommen. Diese sind durch Zähneputzen mit einer stärker abrasiven Zahnpasta bzw. bei der PZR leicht zu entfernen.

- Nicht für Kinder unter 6 Jahren.
- Bei Kindern unter 12 Jahren Anwendung nach zahnärztlicher Anweisung durch die Eltern.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren
- **NICHT SCHLUCKEN!**
- Vor Wärme und Sonneneinstrahlung schützen

Ingredients: Aqua, Chlorhexidin Digluconate

Enthält: Chlorhexidindigluconat 0,06%

XiroDesept®: Mundspül-Set XD-12.

Inhalt: 12 Portionsflaschen à 50 ml

EAN: 40 31179 14001 9

PZN: 11018606


intersanté GmbH
Wellness, Health & Beauty

Berliner Ring 16 B
D-64625 Bensheim
Tél. 06251 - 9328 - 10
Fax 06251 - 9328 - 93
E-mail info@intersante.de
Internet www.intersante.de

