

Eine zahnmedizinische Empfehlung für  
gesündere Zähne, gesünderes Zahnfleisch



# XiroDesept®

Alkoholfrei

Antibakterielle Fertiglösung 0,06% CHX  
für Waterpik® Mundduschen

**NEU**



Fördert die Wundheilung, schützt gezielt  
vor Zahnfleischentzündungen und Parodontitis,  
sorgt für optimale Implantat-Pflege

Hier werden Sie gut beraten:

## Waterpik® Mundduschen

Dass der Gebrauch einer Munddusche von **Waterpik®** in Ergänzung zum täglichen Zähneputzen nützlich und sinnvoll ist, ist wissenschaftlich gesichert und zahnmedizinisch anerkannt. **Waterpik®** als Erfinder und weltgrößter Hersteller von Mundduschen mit einer jahrzehntelangen Erfahrung ist unübertroffen die Nr. 1 unter den Mundduschen und auch die einzige Mundduschenmarke der Welt, welche mit über 50 (!) wissenschaftlichen, evidenzbasierten Forschungsarbeiten die positive Auswirkung ihrer Mundduschen für gesündere Zähne und gesünderes Zahnfleisch signifikant belegen kann. Mit Hilfe ihres pulsierenden, nach Druckstärken einstellbaren Wasserstrahls entfernen **Waterpik®** Mundduschen nachweislich 99,9% des gefährlichen Plaque-Biofilms – Ursache der meisten Zahn- und Zahnfleischprobleme – sind doppelt so wirksam wie Zahnseide und viel einfacher in der Anwendung.

Je nach Bedarf gibt es verschiedene Düsen-Aufsätze wie z.B. die druckminimierte Spezial-Düse **Pik Pocket® PP-100** zur punktgenauen Soft-Applikation, die **Orthodontic-Düse OD-100** zur gezielten Reinigung von Zahnspangen und Bändern oder den **Zungenreiniger TC-100** gegen Mundgeruch.


## XiroDesept®

Im normalen Gebrauch resultiert die Leistung einer **Waterpik®** Munddusche aus einem Wasserstrahl mit etwa 20 Pulsationen/Minute. Zur Intensivprophylaxe, zur Reduktion vor paropathogenen Bakterien sowie zur gezielten Nachsorge von zahnärztlich eingeleiteten therapeutischen Maßnahmen wird jedoch bei der häuslichen Mundhygiene eine 0,06%ige CHX-Fertiglösung wie **XiroDesept®** einfach statt Wasser angewendet.

**XiroDesept®** ist die eigens für **Waterpik®** Mundduschen entwickelte antibakterielle 0,06%ige CHX-Fertiglösung, erhältlich im Set mit 12 Portionsfläschchen à 50 ml. **XiroDesept®** kann der Patient zu Hause nach Anweisung seiner Zahnarztpraxis problemlos und dosiergenau mit der **Waterpik®** Munddusche und der dazugehörigen Spezial-Düse **Pik Pocket® PP-100** gezielt und behutsam am Zahnfleischsaum entlang und auf die entzündungsgefährdeten Problemzonen applizieren (s. Rückseite).



**Waterpik®**  
Munddusche  
Ultra Professional WP-100E4

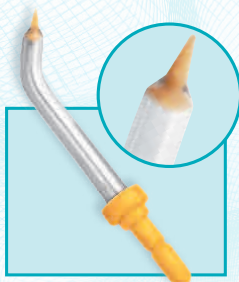


**Waterpik®**  
Spezial-Aufsteckdüse  
Pik Pocket PP-100



**XiroDesept® XD-12**  
Antibakterielle  
Einmal-Fertiglösung  
0,06% CHX

Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass diese System-Anwendung um das Dreifache wirksamer ist, als das konventionelle Ausspülen des Mundes mit einer doppelt so hoch konzentrierten 0,12%igen CHX-Lösung. Ein weiterer positiver Effekt: das Risiko von Zahnverfärbungen und Geschmacksbeeinträchtigungen wird minimiert.

Weitere Informationen auch unter [www.gingiva-schutzsystem.com](http://www.gingiva-schutzsystem.com)

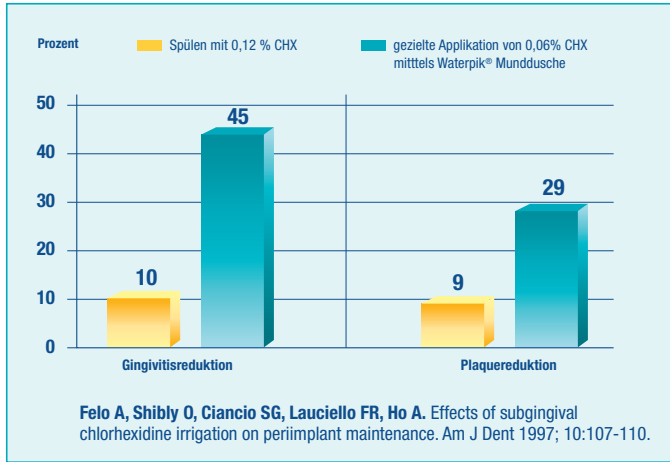

Signifikante Reduktion von Gingivitis (Zahnfleischentzündungen) und Plaque durch das medizinische Schutzsystem

**Waterpik®** Munddusche  
**+ Waterpik®** Spezial-Düse **Pik Pocket**  
**+** antibakterielle 0,06% CHX Fertiglösung

**Waterpik®** Mundduschen und **XiroDesept®** 0,06% CHX Fertiglösung erhalten Sie in Ihrer Zahnarztpraxis, in Ihrer Apotheke oder direkt von **interessanté GmbH**.



**Waterpik®**  
Munddusche  
de Luxe **WP-660E**

**€ 165,00\***  
PZN 10993924



**Waterpik®**  
Munddusche  
Ultra Professional **WP-100E4**

**€ 119,95\***  
PZN 06414599



**Waterpik®**  
Dental-Center  
Complete Care **WP-900E**

**€ 199,00\***  
PZN 09778646



**XiroDesept® XD-12**  
Antibakterielle  
Einmal-Fertiglösung  
0,06% CHX im Set mit 12  
Portionsflaschen à 50 ml

**€ 23,45\***  
PZN 11018606

\*Unverb. Preisempfehlung zum Zeitpunkt der Drucklegung







# Antibakterielle Fertiglösung 0.06% CHX schützt gezielt vor Zahnfleischentzündungen, Parodontitis und Periimplantitis



# XiroDesept®

## Gebrauchsanweisung

1. Als erstes wechseln Sie die Standard –Düse Ihrer **Waterpik®** Munddusche gegen die Spezial-Aufsteckdüse **Pik Pocket®** aus. Achten Sie darauf, dass der Tank der Munddusche leer ist.
2. Stellen Sie den Druckstärkeregler Ihrer **Waterpik®** Munddusche auf die Position 0 (Null).
3. Gießen Sie den Inhalt einer Portionsflasche **XiroDesept®** (50ml) vollständig in den Wassertank. Dann die Spezial-Aufsteckdüse **Pik Pocket®** in den Mund nehmen und das Gerät einschalten.
4. **XiroDesept®** Fertiglösung langsam entlang des Zahnfleischsaums an Unter- und Oberkiefer (innen und außen) applizieren, auf Problemzonen (entzündetes Gewebe, Zahnfleischtaschen) etwas verweilen; um Zahnimplantate und Miniimplantate (bei herausgenommener Prothetik) kreisen, bis die ganze Flüssigkeit aufgebraucht ist. Den Mund nicht nachspülen! Anschließend die **Waterpik®** Munddusche und Spezial-Aufsteckdüse **Pik Pocket®** mit klarem Wasser durchspülen.

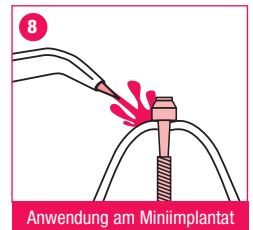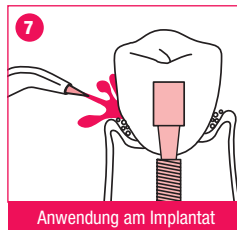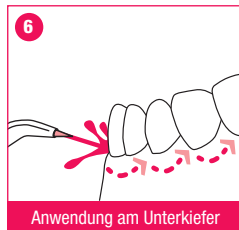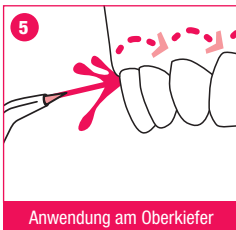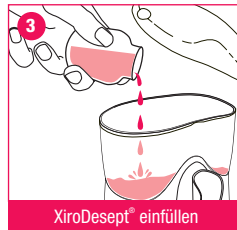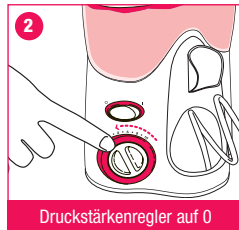

### ■ Hinweis:

Bei chlorhexidinhaltigen Produkten können sehr selten allergische Reaktionen auftreten. Bei ersten Anzeichen wie Hautveränderungen /-ausschlag, Atemnot, Schwellungen von Mund und Gesicht die Anwendung sofort abbrechen und Arzt aufsuchen. In seltenen Fällen kann es zu leichten oberflächlichen Zahn- und Zungenverfärbungen kommen. Diese sind durch Zähneputzen mit einer stärker abrasiven Zahnpasta bzw. bei der PZR leicht zu entfernen.

- Nicht für Kinder unter 6 Jahren.
- Bei Kindern unter 12 Jahren Anwendung nach zahnärztlicher Anweisung durch die Eltern.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren
- **NICHT SCHLUCKEN!**
- Vor Wärme und Sonneneinstrahlung schützen

**Ingredients:** Aqua, Chlorhexidin Digluconate  
**Enthält:** Chlorhexidindigluconat 0,06%  
**XiroDesept®:** Mundspül-Set XD-12.  
**Inhalt:** 12 Portionsflaschen à 50 ml  
**EAN:** 40 31179 14001 9  
**PZN:** 11018606

  
**intersanté GmbH**  
Wellness, Health & Beauty

Berliner Ring 16 B  
D-64625 Bensheim  
Tél. 06251 - 9328 - 10  
Fax 06251 - 9328 - 93  
E-mail info@intersante.de  
Internet www.intersante.de

